


Kinectforce COMPACT

Használati utasítás

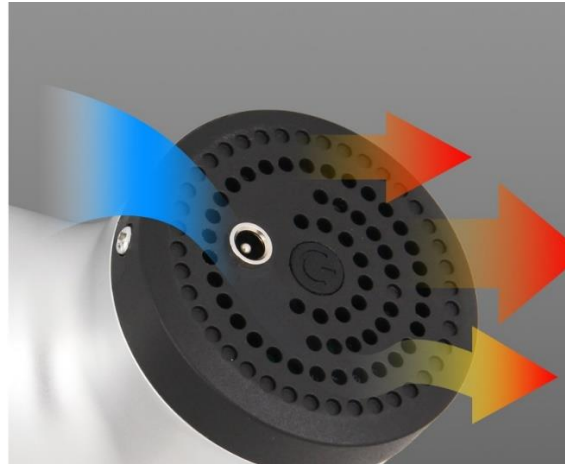

Töltés

- Teljesen töltse fel az akkumulátort akár hat órán keresztül az első használat előtt, a készülékhez rögzítve vagy leválasztva
- A töltéshez csatlakoztassa a mellékelt DC adapter végét az akkumulátor töltőportjához, és dugja be a váltakozó áramú oldali kábelt a fali aljzatba
- Piros LED jelzőfény jelzi a töltést
- Az akkumulátor bármikor feltölthető
- Nem ajánlott teljesen lemeríteni az akkumulátort
- Az átlagos használati idő 2 óra, a sebességtől és a használat közben alkalmazott nyomástól függően

Üzemeltetés

- Bekapcsoláshoz a készülék hátulján található kapcsoló gombot kell megnyomni
- Sebesség választásához és a kikapcsoláshoz nyomja meg többször a kapcsoló gombot
- Masszázsfjejet csavaró mozdulattal helyezze be vagy távolítsa el a gép foglalatából
- Masszírozza a kívánt testrészt a kívánt sebességgel, szükség szerint nyomást gyakorolva

Karbantartás, takarítás

- A készülék tisztításához enyhén nedves törülközőt használjon, és puha ruhával törölje szárazra
- Tároláshoz vagy utazáshoz a mellékelt csomagolást használja

Felelősség kizárása

Figyelmeztetés és óvatosság

- Ne merítse vízbe. Tartsa távol folyadékoktól vagy hőforrásoktól. Tartsa a szellőzőnyílásokat por és törmelék mentes
- Ne távolítsa el a csavarokat, és ne próbálja szétszerelni
- Ne működjön folyamatosan egy óránál tovább. Hagyja az eszközt 30 percig pihenni, mielőtt újra használná
- Töltés után vagy használat előtt húzza ki a töltőt az eszközből
- Csak felnőttek számára. Ne használja sérülésen
- A termék használata előtt konzultáljon orvosával

Biztonsági utasítások

Veszély: az áramütés, a tűz és a személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében ezt a terméket az alábbi utasításoknak megfelelően kell használni

- Csak felnőttek számára
- Csak száraz, tiszta testfelületen használja, enyhén nyomja és mozgassa a készüléket, régióként kb. 60 másodpercig
- A masszázst csak a test lágyrészére használja, fájdalom és kellemetlenség okozása nélkül. Ne használja a fején, a test bármely kemény vagy csontos részén
- Tartsa távol az ujjait vagy bármely más testrészét az applikátor tengelyétől és hátuljától, mert megcsíphet
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a masszázspisztoly szellőzőnyílásaiba
- Ne merítse vízbe, és ne engedje, hogy a víz bejusson a masszázspisztoly szellőzőnyílásaiba
- Csak a mellékelt DC masszázspisztoly töltővel töltsse fel
- Minden használat előtt gondosan vizsgálja meg az eszközt és az akkumulátort
- Semmilyen módon ne manipulálja vagy változtassa meg a masszázspisztolyt
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül működni vagy tölteni a masszázspisztolyt

NYILATKOZAT

Kérjük, ne használja a masszázspisztolyt vagy bármilyen rezgőeszközt anélkül, hogy előzetesen megkapná orvosa jóváhagyását, ha az alábbiak bármelyike érvényes

Terhességi cukorbetegség, olyan szövődményekkel, mint neuropathia vagy retina károsodása, a pace-makers, a közelmúltbeli műtét epilepsziája vagy migrén, herniated discs, spondylolisthesis, spondylolysis vagy spondylosis, a közelmúltban végzett ízületi pótlások vagy spirálok, fém csapok vagy lemezek vagy bármilyen aggály a fizikai egészségi állapotban lévő egyéneket és gyermekeket felnőtt kíséretében kell felügyelni, ha bármilyen vibrációs eszközt használnak. Ezek az ellenjavallatok nem azt jelentik, hogy nem használhat rezgő vagy edző eszközt, de azt javasoljuk, hogy először forduljon orvoshoz

Folyamatos kutatások folynak a rezgés gyakorlásának hatásairól az egyes orvosi rendellenességek esetén. Ez valószínűleg az ellenjavallatok felsorolásának lerövidítését eredményezi, amint azt a fentiek mutatják. A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a rezgésgyakorlás integrálása a kezelési tervbe számos esetben tanácsos. Ezt orvos szakorvos vagy gyógytornász tanácsára kell elvégezni

Garancia

Ha a vásárlástól számított egy éven belül ez a termék anyaghiba vagy gyártási hibája miatt meghibásodik, akkor a terméket vagy a szükséges alkatrészeket ingyenesen megjavítja vagy kicseréli.

Ez a garancia kizárja

- Baleset, visszaélés, helytelen kezelés vagy szállítás okozta kár
- Jogosulatlan javításnak alávetett termék
- Nem az utasításoknak megfelelően használta a terméket
- A termék költségét meghaladó kár

A kiszállított termék romlása a rendellenes tárolás és / vagy az ügyfél telephelyén fennálló körülmények megőrzése következtében

A dátummal ellátott vásárlási igazolás elmulasztása

Fejek:

1. Nagy izomterületek
2. A gerinc körüli izmok
3. Egész test
4. Ízületek része

